

JAMES

james.care



Benutzerhandbuch

JAMES®
NOTRUFUHR

Includes Samsung
Galaxy Watch

DEUTSCH



INHALT

Sobald Sie die Verpackung geöffnet haben, vergewissern Sie sich, dass folgende Komponenten vorhanden sind:



Notrufuhr



Ladekabel



**USB-C
Stromstecker**

HINWEIS: Sollte ein Bestandteil in der Verpackung fehlen, kontaktieren Sie unseren Support.

JAMES®
ilogs healthcare GmbH

Krone Platz 1
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Österreich

james.care



**UHREN
HERSTELLER**

Samsung Electronics Co., Ltd.
PO Box 12987
Blackrock, Co. Dublin
Ireland



INBETRIEBNAHME

AUFLADEN

Bitte laden Sie Ihre Uhr vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie hierzu das **Ladekabel** mit dem **Stromstecker**. Stecken Sie den **Stromstecker** in eine Steckdose. Legen Sie die Uhr auf die magnetische **Ladeplatte**, sodass der Ladevorgang beginnt.



LADEKABEL

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die Uhr korrekt auf der Ladeplatte liegt, um einen einwandfreien Ladevorgang sicherzustellen. **Das Aufladen dauert ca. 1 Stunde.**



EINSCHALTEN

Drücken Sie den SOS-Notrufknopf der Uhr so lange, bis sich der Bildschirm einschaltet.

Nach einem kurzen Startvorgang (ca. 45 Sek.) erscheint die Uhrzeit.

SOS-NOTRUFKNOPF

STEUERKNOPF

AUFWECKEN

Wenn die Uhr 30 Sekunden lang nicht benutzt wird, wechselt sie in den Ruhemodus und der Bildschirm wird schwarz.

Sie können die Uhr durch kurzes Drücken des Steuerknopfes wieder aufwecken.

BATTERIE

Die Batterieanzeige befindet sich links am Bildschirm. Bei 15% Akkustand erfolgt eine Batterie-Warnmeldung auf der Uhr. Zusätzlich wird die Warnung auch in der App/im Webportal angezeigt.

TÄGLICHES AUFLADEN EMPFOHLEN

Schneller Ladevorgang: ca. 1 Stunde

HINWEIS

Beim Kauf der Uhr im JAMES-Online-shop (james.care) mit Basistarif wird die Uhr automatisch aktiviert.

**UHR IST
AKTIVIERT**



IHRE UHR IST AKTIVIERT

Wenn Sie Ihre Notrufuhr im JAMES-Onlineshop mit Basistarif gekauft haben, wurde die Uhr direkt nach Abschluss des Bezahlvorgangs automatisch aktiviert und ist einsatzbereit.

Sie erkennen eine aktivierte Uhr daran, dass beim Antippen des eingeschalteten Uhrzeit-Bildschirms der sogenannte Vitalbildschirm erscheint. Dieser zeigt ein Herzsymbol, die Schrittzahl sowie den 6-stelligen Uhrencode an.

INFORMATION:

Den 6-stelligen Uhrencode benötigen Sie zukünftig bei Anfragen zu Ihrer JAMES-Notrufuhr.

IHRE UHR IST NICHT AKTIVIERT

Ihre JAMES-Notrufuhr ist nicht aktiviert, wenn:

- die Uhr bei einem Handelspartner,
- Partner-Onlineshop (z.B. Amazon)
- oder ohne JAMES-Basistarif gekauft wurde.

Sie erkennen eine nicht aktivierte Uhr daran, dass beim Antippen des eingeschalteten Uhrzeit-Bildschirms die 15-stellige IMEI-Nummer erscheint.

Auf der Homepage unter james.care/start können Sie Ihre Uhr aktivieren. Geben Sie die 15-stellige IMEI-Nummer im dort vorgesehenen Feld ein und bestätigen Sie durch klicken auf „Uhr aktivieren“. Sollte dies nicht erfolgreich sein, kontaktieren Sie bitte unseren Support.



WICHTIG:

Nach dem Einschalten zeigt die Uhr immer den Uhrzeit-Bildschirm! Erst durch Antippen dieses Bildschirms erkennen Sie, ob Ihre Uhr aktiv ist oder noch aktiviert werden muss.

**UHR IST
NICHT AKTIV**



ZUGANGSDATEN ZU JAMES

Nach Kauf Ihrer Uhr im JAMES Online-Shop wird automatisch ein Benutzerkonto für das **JAMES-Webportal** und die **JAMES-App** angelegt. Dort können Sie Ihre Uhr ganz einfach konfigurieren.

Die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail
– bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.



HINWEIS

Für den Online-Shop erhalten Sie ein separates Login.

Hier können Sie bequem ihr Abo verwalten, Rechnungen und Tarife einsehen oder Nachbestellungen vornehmen.

JAMES-APP

Um die JAMES-App herunterzuladen, scannen Sie bitte die unten stehenden QR-Codes. Alternativ können Sie auch den App Store oder Google Play Store öffnen und nach der „JAMES APP“ von ilogs suchen, um die App herunterzuladen.



BENUTZER & PASSWORT

Ihr Benutzername ist in der Regel Ihre E-Mail-Adresse.

Das Passwort können Sie jederzeit über die Funktion „Passwort vergessen“ zurücksetzen.

Anmelden

Benutzername

IHRE MAILADRESSE

Passwort

☐ An diesem Computer angemeldet bleiben

Anmelden

[Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#) [Passwort vergessen?](#)

JAMES WEBPORTAL

Sie erreichen das JAMES-Webportal über die URL **portal.james.care**


Alternativ können Sie auch direkt über die Homepage james.care darauf zugreifen. Dort finden Sie die Option „Webportal“ im rechten oberen Bereich der Seite.

HIER PASSWORT ZURÜCKSETZEN

ALARMIERUNGSKETTE ERSTELLEN

Öffnen Sie die JAMES-App oder das Webportal und loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein.

Im **JAMES-Webportal** sehen Sie auf der Startseite die Kachel „Kontakte & Alarmierungskette“. Klicken Sie auf „Editieren“, um Ihre Anpassungen vorzunehmen.

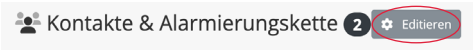

Wichtig:
Häkchen setzen, um den Kontakt zu aktivieren

Reihenfolge der Alarmkontakte ändern

Hier können Sie einen neuen Alarmkontakt anlegen

Kontakte & Alarmierungskette							
<div>Bestehenden Benutzer hinzufügen Neuen Benutzer erstellen Kontakt einladen</div>							
				Nachname	Vorname	Benutzername	Telefonnummer
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	▲ ▼	Mustermann	Max	max.mustermann@test.com	+43123123123
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	▲ ▼	Musterfrau	Maxima	Maxima.Musterfrau	+43111222333
<div>Speichern</div>							

Kontakte bearbeiten, entfernen und Benutzername vergeben

Hier können Sie neue Kontakte zu Ihrer Alarmierungskette hinzufügen, bestehende Kontakte bearbeiten oder die Reihenfolge der Alarmkontakte anpassen.


In der Alarmierungskette können bis zu 10 Kontakte hinterlegt werden. Diese haben zudem die Möglichkeit, die JAMES-App zu nutzen, um eine Ortung durchzuführen oder Informationen einzusehen.

In der **JAMES-App** finden Sie im roten Bereich rechts oben, das Einstellungs-Symbol (ein Zahnrad).



Symbol für Einstellungen in der App


Tippen Sie darauf und wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die Option „Kontakte & Alarmierungskette“. Bearbeiten Sie nun Ihre Kontakte.

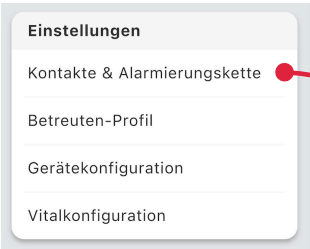

ALARMKONTAKTE BEARBEITEN

HINWEIS

Das Handbuch zur JAMES-App finden Sie auch direkt in der App unter den Einstellungen (ganz unten).

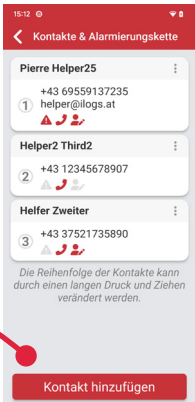

ALARM AUSLÖSEN

Drücken Sie den **SOS-Notrufknopf** für mehrere Sekunden, bis Sie ein akustisches Signal hören und das rote SOS-Symbol am Bildschirm sehen.

Wenn Sie den Alarm nicht abbrechen, ruft die Uhr Ihre hinterlegten Notrufkontakte der Reihe nach an.



HINWEIS

Nach einem Alarm bleibt die Uhr eine Stunde im Alarmmodus und nimmt Anrufe automatisch an. Wird der Alarm in der App geschlossen, endet der Alarmmodus der Uhr früher.



**SOS-NOTRUFKNOPF
LANGE DRÜCKEN**

ALARM ABBRECHEN

Durch tippen auf das "X" am roten SOS-Bildschirm, haben Sie in den ersten Sekunden die Möglichkeit, den Alarm abzubrechen, falls dieser unbeabsichtigt ausgelöst wurde.

ALARM ANNEHMEN

Bei einem Alarm ruft JAMES Ihre Notrufkontakte nacheinander an. Eine Tonbandansage informiert über den Notruf, der vom Kontakt durch **drücken der Taste 2 am Telefon** angenommen werden kann. Nach Annahme des Alarms, wird eine Telefonverbindung zur Uhr hergestellt.



**TELEFONVERBINDUNG
ZUR UHR**

Sie funktioniert wie ein Mobiltelefon: Der Notrufkontakt kann direkt mit der Person sprechen, die die Uhr trägt. Zusätzlich wird eine SMS mit der Position der Uhr gesendet. Diese wird laufend präzisiert. Bleibt der Anruf unbeantwortet, wird der Alarm an den nächsten Kontakt weitergeleitet. **Die Alarmierungskette wird 3x hintereinander durchlaufen.**



ANRUF ANNEHMEN

Ihre Uhr ermöglicht es Ihnen auch normale Telefonate anzunehmen. Hierfür benötigen Sie keinen separaten JAMES-Tarif.

Wenn ein Anruf eingeht, wird dieser auf dem Bildschirm der Uhr angezeigt. Tippen Sie auf das **grüne Telefonsymbol**, um den Anruf anzunehmen. Sie können nun direkt über die Uhr sprechen.



HINWEIS

JAMES-Notruffahren verwenden Roaming-SIM-Karten mit der Vorwahl +41 (Schweiz - Swisscom)

ANRUF ABLEHNEN

Tippen Sie auf das **rote Telefonsymbol**, um den Anruf abzulehnen.

RUFNUMMER DER UHR

Die **Rufnummer Ihrer Galaxy-Uhr** finden Sie entweder in der **JAMES-App**

oder in Ihrem persönlichen **JAMES-Webportal**.

Die Rufnummer wird ebenfalls **in der Alarm-SMS** angezeigt, die der Alarmkontakt erhält, wenn ein Notruf abgesendet wird.



UHR AUSSCHALTEN

Wecken Sie die Uhr zuerst durch kurzes Drücken des Steuerknopfes auf, sodass der Uhren-Bildschirm aktiv ist. Halten Sie dann beide Knöpfe gleichzeitig (!)

gedrückt, bis das Ausschalten-Symbol angezeigt wird. Tippen Sie auf das Ausschalten-Symbol am Bildschirm um die Uhr auszuschalten.



AUSSCHALTEN-SYMBOL TIPPEN

GLEICHZEITIG LANG DRÜCKEN



PULSMESSER

Drücken Sie den Steuerknopf, um Ihre JAMES-Notrufuhr „aufzuwecken“, falls der Bildschirm schwarz ist.

Legen Sie den Arm während des Messvorgangs ruhig auf eine Oberfläche und halten Sie ihn still. Je enger die Uhr sitzt, umso genauer ist die Messung. Sie können die Uhr dazu am Arm ein wenig weiter nach oben schieben.

TIPP

Sie können die Puls-messung auch direkt über Ihre JAMES-App starten. Die Auswertung wird anschließend auf dem Bildschirm Ihrer Uhr angezeigt.



Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Tippen Sie kurz auf den Uhren-Bildschirm, um den Vitalbildschirm zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Herz-Symbol, um die Pulsmessung zu starten. Die Messung beginnt automatisch. Ein großes Herz-Symbol erscheint und zeigt an, dass die Messung läuft. Nach einigen Sekunden wird der gemessene Puls angezeigt.

HINWEIS

Der zuletzt gemessene Puls bleibt für max. 15 Minuten auf dem Vitalbildschirm sichtbar (neben dem Herz-Symbol). Zusätzlich wird angezeigt, wie viele Minuten seit der letzten Messung vergangen sind.

SCHRITZÄHLER

Am Uhren-Bildschirm werden Ihnen Ihre aktuellen Tagesschritte laufend angezeigt. Durch kurzes tippen auf diesen öffnet sich der Vitalbildschirm, indem Sie Ihre Schritte ebenfalls einsehen können.



KURZER DRUCK AUF DEN BILDSCHIRM

VITALBILDSCHIRM MIT SCHRITZÄHLER



Uhrencode

Im Vitalbildschirm ist der Uhrencode immer sichtbar.

Die Schritte werden jede Nacht automatisch auf 0 gesetzt.

Die Schritte können auch in **der JAMES-App / dem JAMES-Webportal** jederzeit abgefragt werden.

NETZEMPfang

Wischen Sie am „wachen“ Bildschirm (Uhranzeige ist sichtbar) von oben nach unten, dann gelangen Sie zu einem grauen Bildschirm mit Einstellungssymbolen. **Ganz oben sehen Sie den Netzempfang.**



ACHTUNG

Sind die Balken blass - also ausgegraut - dann haben Sie keinen Empfang (z.B. durch ein Funkloch).

Ohne Empfang ist kein Notruf möglich!

Lösung: Starten Sie die Uhr neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie unseren Support.

WICHTIG: Es kann passieren, dass Sie unbeabsichtigt durch Wischen von oben nach unten in diesem Bereich landen. Drücken Sie den Steuerknopf kurz oder wischen Sie von unten nach oben, um zurück zur Uhranzeige zu gelangen.



**Balken blass
=
kein Empfang**



SCHUTZKLASSE IP68

IP steht für „Ingress Protection“, also „Eindringungsschutz“. Es beschreibt, wie widerstandsfähig elektronische Geräte gegenüber Staub und Wasser sind.



Die Schutzart IP68 bietet einen hohen Schutz vor Staub und Wasser. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10°C und +40°C.



ACHTUNG

Die Uhr darf Folgendem nicht ausgesetzt werden:

- **Salzwasser (z.B. Meer)**
- **chlorhaltiges Wasser (z.B. Schwimmbad)**
- **heiße Seifenlauge (z.B. Badewanne, Abwasch)**

Solche Wasserschäden sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.

ORTUNG IM HAUS

JAMES-LOCATOR

Die Ortung innerhalb von Gebäuden ist schwierig. Der JAMES-Locator unterstützt Ihre Notrufuhr bei der genauen Ortung zu Hause. Er wird ganz einfach zentral in einer Steckdose angesteckt und im Webportal registriert. Fertig.



TIPP

Zentral platzieren für optimale Abdeckung! 1 Locator deckt eine 2-Zimmer-Wohnung ab.

19

HINWEIS

Bei Einfamilienhäusern oder größeren Wohnbereichen benötigen Sie zusätzlich weitere Locator. Diese erhalten Sie kostengünstig bei über unseren JAMES-Support oder direkt in unserem Online-Shop.



NOTRUFZENTRALE

ZUSATZTARIF - OPTIONAL BUCHBAR

Dieser optional buchbare Zusatztarif ergänzt die Helferkette um eine ständig verfügbare Notrufzentrale, die Alarme rund um die Uhr 24/7 zuverlässig entgegennimmt und rasch bearbeitet.

Sollten Ihre hinterlegten Kontakte im Ernstfall nicht erreichbar sein, sorgt die Rufzentrale jederzeit dafür, dass umgehend die erforderliche Hilfe organisiert wird.

Buchen Sie diesen
Zusatztarif im
Online-Shop:
james.care



HINWEIS

Aktuell bietet JAMES für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien, Niederlande und Großbritannien jeweils eine Notrufzentrale an. Weitere Länder werden folgen.

20

REINIGUNG

Bei längerem Tragen ist die Uhr Schweiß und Staub ausgesetzt und sollte mindestens **einmal im Monat gereinigt werden**.

Für die Grobreinigung empfehlen wir, ein **mit Wasser angefeuchtetes Brillenputztuch** zu verwenden.

Verunreinigungen in den Ritzen des Gehäuses sollten mit einer trockenen, weichen Zahnbürste entfernen werden.



ACHTUNG

Für die Reinigung dürfen keine **Seifenlaugen oder Desinfektionsmittel** verwendet werden.



JAMES SUPPORT

ÖSTERREICH

+43 463 305 003 - 0
support@james.care

DEUTSCHLAND

+49 89 54196043 - 0
support-de@james.care

SCHWEIZ

+41 44 797358 - 0
support-ch@james.care

INKL. HILFREICHER YOUTUBE-VIDEOS



GENDER HINWEIS

Alle personenbezogenen Bezeichnungen in diesem Handbuch gelten für alle Geschlechter gleichermaßen.

WICHTIG

Bei Fragen oder Problemen besuchen Sie bitte unsere Hilfeseite auf **james.care/hilfe**

Für Anfragen zur Uhr benötigen wir den Uhrencode oder die 15-stellige IMEI-Nummer (auf der Verpackung oder Rückseite der Uhr). Den Uhrencode sehen Sie durch kurzes Tippen auf den aktiven Bildschirm der Uhr.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten. Beachten Sie die Warnhinweise unten, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verhindern.

- Das Gerät enthält Magnete. Halten Sie es fern von Kreditkarten, implantierten medizinischen Geräten und anderen Geräten, die von Magneten beeinflusst werden können. Bei medizinischen Geräten solltest du einen Abstand von mehr als 15 cm einhalten. Stelle die Verwendung des Geräts ein, wenn du eine Störung deines medizinischen Geräts vermutest, und wende dich an deinen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und setzen Sie es weder physischen Stößen noch anderen Dingen aus, die es beschädigen könnten.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte und speziell entwickelte Kabel. Achten Sie zudem darauf, dass die Multifunktionsbuchse nicht mit Fremdkörpern in Kontakt kommt.
- Falls ein Teil des Geräts defekt ist oder wenn Rauch bzw. ein Brandgeruch entsteht, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung oder einem autorisierten Servicecenter geprüft und repariert wurde.
- Das Gerät kann bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und 50 °C

auf. Bei Nichtbeachtung der empfohlenen Umgebungstemperaturbereiche kann das Gerät beschädigt oder die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.

- Tragen Sie das Gerät so, dass es an Ihrem Handgelenk anliegt, um eine genaue Messung zu ermöglichen. Lösen Sie nach der Messung das Armband, damit Luft an die Haut gelangen kann. Wir empfehlen, das Gerät so zu tragen, dass es weder zu locker noch zu eng ist und sich unter normalen Umständen angenehm anfühlt.
- Falls Sie empfindliche Haut haben, kann es zu Hautreizungen durch bestimmte Faktoren wie Reibung, Druck oder Feuchtigkeit kommen, z. B. wenn das Gerät zu eng oder zu locker sitzt, wenn Schweiß oder Fremdkörper auf dem Gerät sind oder wenn das Gerät zu lange getragen wurde.
- Falls Ihre Haut an der Stelle, an der das Gerät getragen wird, gereizt ist, nehmen Sie das Gerät sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Halten Sie das Gerät immer sauber und trocken.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen.



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehöerteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt, der Akku und die elektronischen Zubehöerteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. (Für Akkus wird dasselbe Symbol ohne den Balken darunter verwendet.)

- Weitere Informationen zum Umweltengagement von Samsung und den produktspezifischen Regulierungsaufgaben wie zu REACH finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter www.samsung.com
- Wenn auf einem Teil des Bildschirms oder auf dem gesamten Bildschirm über einen längeren Zeitraum feststehende Grafiken angezeigt werden, kann es zu Nachbildern (Einbrennen des Bildschirms) oder Geisterbildern kommen.
- Das Gerät ist wasser- und staubbeständig und erfüllt die folgenden internationalen Standards:
Die Wasserbeständigkeitsklasse 5ATM wurde getestet, indem das Gerät 10 Minuten lang in 50 m Süßwasser getaucht wurde, ohne dass es sich bewegte, um die Anforderungen von ISO 22810:2010 zu erfüllen. Die Wasserbeständigkeitsklasse IP68 wurde getestet, indem das Gerät 30 Minuten lang in 1,5 m Süßwasser getaucht wurde, ohne dass es sich bewegte, um die Anforderungen von IEC 60529 zu erfüllen.
- Sie müssen die nachstehenden Tipps befolgen, um die Wasser- und Staubbeständigkeit des Geräts zu erhalten. Andernfalls kann die Wasser- und Staubbeständigkeit nicht garantiert werden:
Wenn Sie geschwommen sind oder das Gerät mit anderen Flüssigkeiten als Süßwasser in Berührung gekommen ist, z. B. mit Kaffee, Getränken, Seifenwasser, Sonnencreme, Handdesinfektionsmitteln oder chemischen Produkten wie Kosmetika, spülen Sie das Gerät mit Süßwasser ab und trocknen Sie es gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch ab, um seine Wasserbeständigkeit zu erhalten.

Halten Sie sich mit dem Gerät nicht länger unter Wasser auf, tauchen Sie nicht, treiben Sie keinen Wassersport und schwimmen Sie nicht in schnell fließendem Wasser, wie z. B. in einem Fluss.

Falls das Gerät einem Stoß ausgesetzt oder es beschädigt wird, kann seine Wasser- und Staubbeständigkeit beeinträchtigt werden.

Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne entsprechende Anleitung.

Falls Sie das Gerät mit einem Heißluftgerät (z. B. einem Haartrockner) trocknen oder es in einer heißen Umgebung (z. B. in einer Sauna) verwenden, könnte die Wasserbeständigkeit durch eine drastische Änderung der Luft- oder Wassertemperatur beeinträchtigt werden.

- Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch. (<https://www.samsung.com>)

Akku entfernen

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Die ilogs healthcare GmbH ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar.

Informationen zur SAR-Zertifizierung
(Spezifische Absorptionsrate)

Der Aufbau des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Die speziellen SAR-Werte für Ihr Modell finden Sie unter www.samsung.com/sar. Suchen Sie dort nach Ihrer Region und anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Band und Modus	Ausgangsleistung
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/20/28/40	23 dBm
WLAN 2,4 GHz	20 dBm
WLAN 5,1-5,7 GHz	23 dBm
WLAN 5,8 GHz	25 mW
Bluetooth 2,4 GHz	20 dBm
NFC 13,56 MHz	42 dBuA/m bei 10 m
Induktives Laden (100-148,5 kHz)	37,7 dBuA/m bei 10 m

Die WLAN-Funktion darf innerhalb von Gebäuden ohne Einschränkung verwendet werden. Diese Einschränkung gilt in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI), GB.

Konformitätserklärung

Samsung erklärt, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU und relevanten gesetzlichen Vorschriften des Vereinigten Königreichs entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.samsung.com/mobile_doc

Samsung
PO Box 12987, Dublin. IE / Yateley, GU46 6GG. UK Copyright ©
2024 Samsung Electronics Co., Ltd.



IHRE NOTIZEN